



De bedoeling van deze BMI meter is dat je BMI regelmatig controleert en stuurt naar een gezonder lichaam.

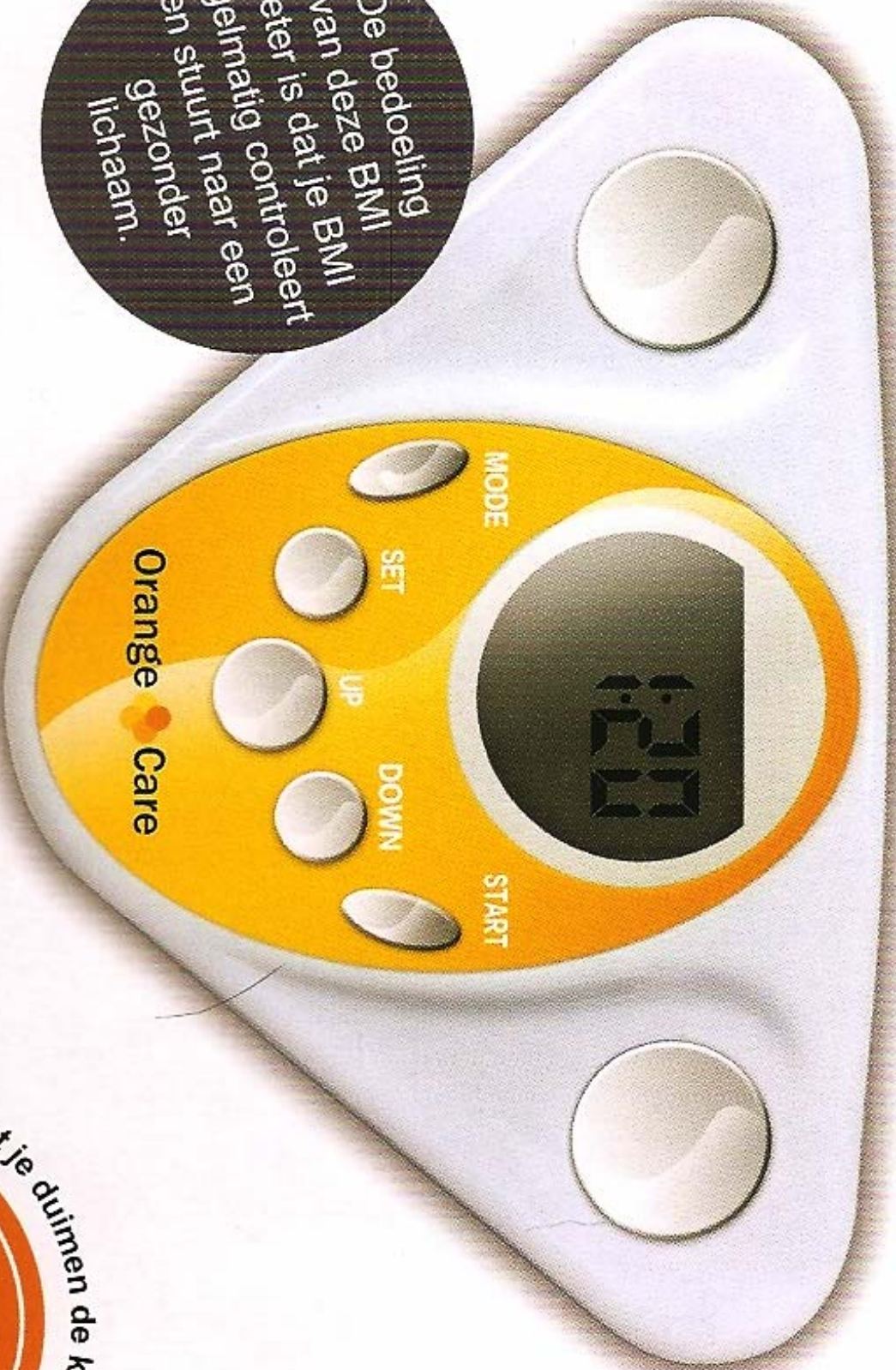

**Handy Type**

**BMI Meter**

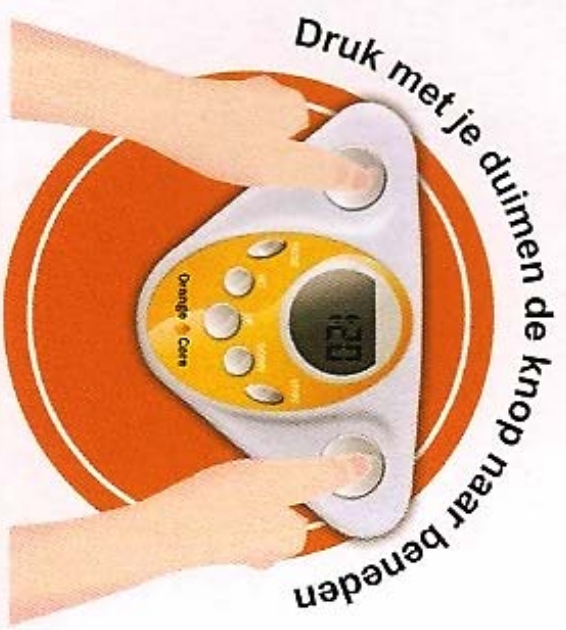

Druk met je duimen de knop naar beneden



Tijd



Alarm



8 Geheugen-plaatsen

# Instructie Handleiding BMI Meter

## Functies:

1. Vetmeter voor mannen en vrouwen
2. Testfunctie en 8 geheugenplaatsen
3. Vijf knoppen: MODE, SET, UP, DOWN, START
4. Metrisch Systeem
5. Alarmfunctie
6. Tijdfunctie

## Gebruikershandleiding

- Druk op MODE om een functie te kiezen: Tijd, Set, Gewicht en Alarm.
- Zet tijd, druk lang op SET en kies 24Hr/12 Hr, druk op UP/DOWN en kies voor 12 Hr.
- Druk op UP/DOWN om de tijd te zetten en druk op SET om de tijd te bevestigen.
- Druk op MODE om de vet test module te starten, druk op SET om gewicht en lengte te selecteren.
- Druk op UP/DOWN om actuele gewicht/lengte/leeftijd en geslacht in te stellen.
- Druk opnieuw op SET om de gegevens te bevestigen en druk dan op START.
- Druk in de tussentijd je 2 duimen op de knoppen en lees de gegevens af.
- Zet Alarm, stel AL scherm in, druk lang op SET totdat het LCD scherm flinkt. Druk dan op UP/DOWN om de actuele alarmtijd in te stellen.

## Verwisseling van batterijen

1. Afdekplaat aan de achterzijde naar links draaien om te openen en batterij op een juiste manier invoegen.
2. Niet oplaadbare batterijen worden niet opgeladen.
3. Vermijd kortsluiting in de batterijruimte.
4. Batterij van zelfde type/voltage invoegen.
5. Lege batterijen moeten worden verwijderd uit het product.
6. De verpakking moet worden bewaard omdat het belangrijke informatie bevat.

## Zorgdragen voor de BMI Meter

- Vermijd vallen van de BMI Meter, het LCD scherm kan breken.
- Vermijd overmatig vocht. De monitor is niet waterdicht.
- Verander de batterij als het digitale scherm verkleurd of vaal wordt. Wij raden u aan om de batterij 1 x in het jaar te vervangen voor een optimaal resultaat.
- Demonteer het apparaat alleen voor het vervangen van de batterij.